

ProxySoft®

Pionirji v preprečevanju
bolezni dlesni

SUPERNITKE
ZA ČISTE
MEDZOBNE
PROSTORE







3 IN 1 FLOSS

Večnamenska nitka

Posebna zobna nitka za vsakodnevno čiščenje. V eni enoti so plastični vdevalnik, zobna nitka in običajna filamentna čistilna gobica za čiščenje medzobnih prostorov, pod mostički in sponkami fiksnega ortodonskega aparata.

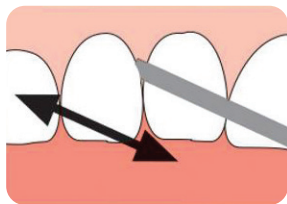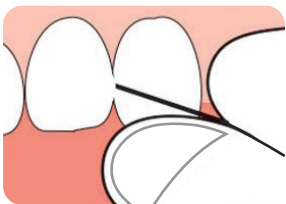

PRIMER UPORABE: vstavljanje vdevalnika v medzobni prostor

Vdevalnik

Filamentna čistilna gobica

Zobna nitka

Premer gobice: 3,2 mm
 Dolžina enega kosa nitke: 70 cm
 Št. nitk v škatlici: 100




BRIDGE & IMPLANT

Nitka za čiščenje pod mostički in okrog implantatov

Poseben pripomoček za čiščenje medzobnih prostorov, debela filamentna čistilna gobica, s katero čistimo okrog vsadkov in pod mostički. Zelo trd vdevalnik na vsakem koncu gobice omogoča vstavljanje brez pomožne vdevalne zanke.

Izdelek je primeren za vsakodnevno uporabo pri parodontalnih težavah in za čiščenje okrog fiksnih ortodontskih aparatov.

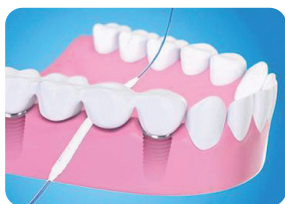

PRIMER UPORABE:
čiščenje okrog vsadka

Vdevalnik

Filamentna čistilna gobica

Vdevalnik

Premer gobice: 4,7 mm
Dolžina enega kosa nitke: 25,4 cm
Št. nitk v škatlici: 30

ProxySoft®




PERIODONTAL FLOSS

Parodontalna nitka

Zobna nitka za posebne potrebe. V eni enoti so zelo čvrst vdevalnik, zobna nitka in odebljena čistilna gobica za čiščenje velikih medzobnih prostorov.

Izdelek je primeren za vsakodnevno uporabo pri parodontalnih težavah, čiščenju pod mostički, pri implantatih in pri fiksnih ortodontskih aparatih.

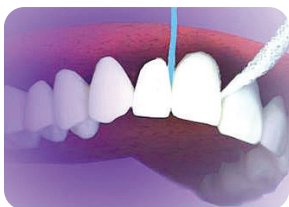

PRIMER UPORABE:
čiščenje medzobnega prostora

Vdevalnik

Filamentna čistilna gobica

Zobna nitka

Premer gobice: 4,7 mm
Dolžina enega kosa nitke: 70 cm
Št. nitk v škatlici: 50



Zobne nitke ProxySoft so učinkovite in praktične za uporabo.



Filamentna čistilna gobica očisti celo petkrat več prostora kot običajna zobna nitka.



Dodatni vdevalnik nitke ni potreben.

NAMIGI ZA UPORABO

- 1. Na filamentno čistilno gobico lahko dodate ustno vodo, zobno pasto ali zdravila, ki vam jih je predpisal zobozdravnik.*
- 2. Zelo široke prostore poskusite čistiti z dvema vzporednima nitkama.*
- 3. Pri tesnih stikih med zobmi dodajte na nitko malo zobne paste, da olajšate zdrs med zobe.*
- 4. Ko so zobje očiščeni zobnih oblog, vas nitka na to opozori z rahlim škripanjem.*

ZA ČIŠČENJE KRITIČNIH MEST OB MOSTIČKIH,
IMPLANTATIH IN FIKSNIH ORTODONTSKIH
APARATIH UPORABITE:

SUPERNITKE
PROXYSOFT
PRIMERNE ZA VSO
DRUŽINO



3 IN 1 FLOSS

Večnamenska nitka

BRIDGE & IMPLANT

Nitka za čiščenje
pod mostički in
okrog implantatov

PERIODONTAL FLOSS

Parodontalna nitka

flegis



Zdrav nasmeh
je uspeh!

FLEGIS, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36
2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 460 53 42
Faks: +386 (0)2 460 53 43
E-pošta: info@flegis.si

www.zdrav-nasmeh.com